


Frigocongelatori

I frigo-congelatori combinati jointlab sono il massimo della tecnologia al miglior prezzo possibile oggi sul mercato. L' ecletticità della serie DO è dimostrata dal fatto che può essere utilizzata in tutti gli ambienti: dal laboratorio al farmaceutico. Massimo risparmio nei consumi energetici, tecnologia no-Frost e ambienti interni ventilati.



MODELLO DO 5121S

- 3...8°C / -9...-30°C
- Temperatura ambiente max da 10°C + 38°C
- Doppio comando elettronico a tastiera e membrana
- Allarme ottico acustico per sovra-sotto temperatura regolabile
- Allarme ottico-acustico porta aperta regolabile
- Allarme guasto sonde e spia mancata alimentazione
- Memoria temperatura massima e minima e tre memorie allarmi con data e ora
- Possibilità di calibrazione su un punto di temperatura
- Allarme remoto e interfaccia RS 485
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento nel frigo
- Foro di controllo 10mm nel frigo
- Porte a chiusura automatica
- Serrature
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel frigo
- Sbrinamento automatico e manuale

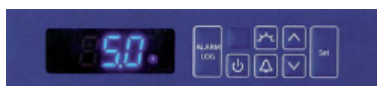

Pannello di controllo

MODELLO DO 6267

- 2...11°C / -16...-28°C
- adatto per temperature ambiente da 10°C a 43°
- Comando elettronico LCD retroilluminato
- Sbrinamento automatico
- Raffreddamento parte frigo a ricircolo d'aria
- Congelatore no-frost
- Illuminazione vano frigo
- Classe energetica A+
- allarme ottico acustico aumento temperatura e porta aperta
- 2 compressori

Pannello di controllo



| DO | 5121S | 6267 |
|--|---|-----------------------------------|
| Litri frigo/congelatore lordo | 254 / 107 | 358 / 141 |
| Temperatura | 3...8°C / -9...-30°C | 2...11°C / -16...-28°C |
| Dimensioni esterne (A/L/P)mm | 2000/600/615 | 2020/750/630 |
| Dimensioni interne frigo (A/L/P)mm | 1110/455/435 | - |
| Dimensioni interne congelatore (A/L/P)mm | 597/431/435 | - |
| Gas refrigerante | R 600a | R 600a |
| Consumo energetico (KWh/24h) | 1,800 | 1,050 |
| Rumore | 43 db | 42 db |
| Materiale interno | Plastica PS termoformata | Plastica PS termoformata |
| Materiale/colore esterno | Lamiera trattata con resine epossidiche/ bianco | Acciaio satinato |
| Materiale porta | Acciaio trattata con resine epossidiche/ bianco | Smartsteel in acciaio antimpronta |
| Vassoi a griglia (frigo) | 4 | 4 |
| Cassetti (congelatore) | 3 | 3 |
| Sbrinamento frigo/congelatore | automatico/manuale | automatico/automatico |
| Interfaccia | RS 485 | - |
| Tensione/Valore collegamento | 220-240 V /1,5A | 220-240 V /1,5A |

Accessori

TX-KLI 5P.37 Registratore di temperatura grafico a disco settimanale

TX-Log32 Registratore di temperatura wireless (senza fili), ricevitore USB e software per la gestione dei dati -40°C...60°C con capacità di monitorare fino a 500 registratori; precisione +/-0,3°C. Memoria per 32 giorni (1 x 15min); IP 67; Range 200 mt in spazio aperto.

Log 32 Registratore wireless aggiuntivo. Montato sul/i frigoriferi

TX-PI3A Presa interna per frigorifero

TX-fp10 Foro passa cavi 10mm

TX-fp20 Foro passa cavi 20mm

TX-clf Contatto libero con sonda temperatura

AL 2111 Allarme acustico mancanza corrente elettrica (max 12 ore)

