

Frigoriferi da laboratorio e farmaceutico 5°C 28 / 53 / 141 / 360 Lt.

Il modello ET Jointlab è la soluzione ideale per i prodotti sensibili al calore come vaccini, insulina e medicinali che necessitano di una temperatura costante, compresa fra +2 °C e +8 °C. Oltre ai modelli di serie con display, cassette e termometro, sono disponibili frigoriferi accessoriati con registratore di temperatura wireless, registratore grafico o con speciali cassette e griglie. Inoltre, grazie al design semplice e alla disponibilità di modelli con la porta in vetro, tutti i prodotti sono esposti ordinatamente e a portata di mano.




ET 28

I modelli ET 28, ET 53 di rispettivamente 28 e 53 Lt. sono disponibili nella versione DL con registratore di temperatura elettronico wireless premontato e software per lo scaricamento dei dati. Nella versione GR con registratore di temperatura grafico.



DL

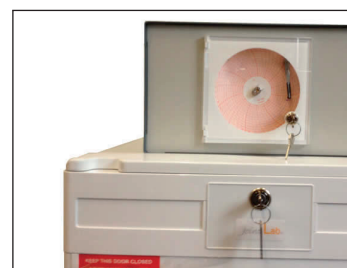


GR



ET 2721

I modelli ET 2721, ET 4021 di rispettivamente 141 e 360 Lt. sono disponibili anche con cassette in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. e griglie in acciaio plastificato. I modelli ET 2723 ed ET 4023 hanno in più la porta in vetro.

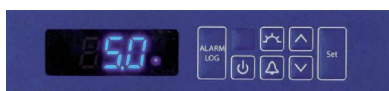

Display ET 2721 / 4021



ET 2723/3d :

porta in vetro e 3 cassette in plastica con trattamento antibatterico con tre linee e 12 divisori cad. + 3 griglie in acciaio plastificato



ET 4023/6d :

porta in vetro e 6 cassette in plastica con trattamento antibatterico con tre linee e 12 divisori cad. + 5 griglie in acciaio plastificato





ET 28 Frigorifero da laboratorio e farmaceutico per molteplici applicazioni anche sottobanco; **lt 28 netti** esterno bianco; temperatura 5°C controllata elettronicamente con display; cassetti trasparenti 3; dimensioni esterne l/p/a cm 42x39x58. Ventilato; serratura; porta piena con cerniera a destra; luce interna a led; guarnizioni di chiusura magnetiche; allarme porta aperta; memorizzazione della massima e minima temperatura.



ET 53 Frigorifero da laboratorio e farmaceutico per molteplici applicazioni anche sottobanco; **lt 53 netti** esterno bianco; temperatura 5°C controllata elettronicamente con display; cassetti trasparenti 3; dimensioni esterne l/p/a cm 48,6x49x59. Ventilato; serratura; porta piena con cerniera a destra; luce interna a led; guarnizioni di chiusura magnetiche; allarme porta aperta; memorizzazione della massima e minima temperatura.



ET 28DL Come ET 28 con datalogger premontato esternamente e sonda NTC interna. Il datalogger può venire estratto per il collegamento al pc e lo scaricamento dei dati di temperatura tramite software(incluso). I dati scaricati possono essere visualizzati sotto forma grafica.



ET 53DL Come ET 53 condatalogger premontato esternamente e sonda NTC interna. Il datalogger può venire estratto per il collegamento al pc e lo scaricamento dei dati di temperatura tramite software(incluso). I dati scaricati possono essere visualizzati sotto forma grafica.



ET 28RG Come ET 28 con in più un registratore di temperatura grafico. In questo caso le dimensioni esterne differiscono dall'ET 28: l/p/a 42x39x58 + 17 cm di registratore in altezza.



ET 53RG Come ET 53 con in più un registratore di temperatura grafico. In questo caso le dimensioni esterne differiscono dall'ET 53: l/p/a 48,6x49x59 + 17 cm di registratore in altezza.





ET 2721

ET 2721 Frigorifero per farmaci lt 141; esterno acciaio verniciato bianco; porta piena; temperatura 5°C; griglie in acciaio plastificato 3; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x62x82; Interne cm 44x44x67. Raffreddamento a ricircolo d'aria; Sbrinamento automatico; serratura; porta piena con cerniera a destra reversibile; copertura di sicurezza evaporatore; controllore elettronico e display digitale precisione 0,1°C; allarmi di sotto e sopra temperatura regolabili e porta aperta; allarme interruzione corrente elettrica; termostato di sicurezza; interfaccia RS 485; memorizzazione max e min temperatura e allarmi; contatti a potenziale libero per allarmi esterni; Termostato di sicurezza; foro inserimento sonde; adatto per temperature ambiente da 10°C a 38°C; rumore 42dB; vano interno in PS; conformi alla DIN 58345.

ET 2721/2d Variante del modello ET 2721 con 2 cassette in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato

ET 2721/3d Variante del modello ET 2721 con 3 cassette in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato



ET 2723

ET 2723 Come ET 2721 ma con porta in vetro.

ET 2723/2d Variante del modello ET 2723 con 2 cassette in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato

ET 2723/3d Variante del modello ET 2723 con 3 cassette in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato



ET 4021

ET 4021 Frigorifero per farmaci da lt 360; esterno bianco; temperatura 5°C; griglie in acciaio plastificato 5; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x62x184; Interne cm 44x44x164. Raffreddamento a ricircolo d'aria; Sbrinamento automatico; serratura; porta vetro con cerniera a destra reversibile; copertura di sicurezza evaporatore; controllore elettronico e display digitale precisione 0,1°C; allarmi di sotto e sopra temperatura regolabili e porta aperta; allarme interruzione corrente elettrica; termostato di sicurezza; interfaccia RS 485; memorizzazione max e min temperatura e allarmi; contatti a potenziale libero per allarmi esterni; Termostato di sicurezza; foro inserimento sonde; adatto per temperature ambiente da 10°C a 38°C; rumore 43dB; vano interno in PS; conformi alla DIN 58345.

ET 4021/6d Come ET 4021 ma 6 cassette in plastica con trattamento antibatterico con tre linee e 12 divisori cad. + 5 griglie in acciaio plastificato



ET 4023

ET 4023 Come ET 2721 ma con porta in vetro.

ET 4023/6d Come ET 4023 ma 6 cassette in plastica con trattamento antibatterico con tre linee e 12 divisori cad. + 5 griglie in acciaio plastificato

ET	28 (ET 28 DL; ET 28 RG)	53 (ET 53 DL; ET 53 RG)	2721 (ET 2723)	4021 (ET 4023)
Litri	28	53	141	360
Temperatura	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Cassetti	3 trasparenti	3 trasparenti	in opzione	in opzione
Griglie	-	-	3 griglie in acciaio plast.	3 griglie in acciaio plast.
Display	LCD	LCD	Digitale	Digitale
Allarmi	Porta aperta, mancanza corrente in opzione	Porta aperta, mancanza corrente in opzione	Temperatura, porta aperta, sonda guasta, mancanza corrente	Temperatura, porta aperta, sonda guasta, mancanza corrente
Rumore dB	20	20	42	42
Registrazione temperatura	NO (SI DL - SI RG)	NO (SI DL - SI RG)	In opzione	In opzione
Termometro di min e max	SI	SI	SI	SI
Gas refrigerante	151g H2O + 101g NH3	157g H2O + 105g NH3	R 600a	R 600a
Consumo energetico (KWh/24h)	0.86	1.05	0,747 (1,010)	0.846 (1,315)
Porta	Piena	Piena	Piena (vetro)	Piena (vetro)
Luce interna	SI	SI	NO (SI)	NO (SI)
Peso kg	15	20	37	72



Accessori

JL 416231 Cassetto in alluminio base perforata con tre linee e dodici divisori per ET 2723/4023

JL 416231 Cassetto in alluminio con serratura base perforata con tre linee e dodici divisori per ET 2723/4023

JL 416600 Cassetto in plastica con tre linee e dodici divisori per ET 2723/4023

JL 416763 Cassetto in plastica con trattamento antibatterico con tre linee e dodici divisori per ET 2723/4023

TX-KLI 5P.37 Registratore di temperatura grafico a disco settimanale

TX-Log32 Registratore di temperatura wireless (senza fili), ricevitore USB e software per la gestione dei dati -40°C...60°C con capacità di monitorare fino a 500 registratori; precisione +/-0,3°C. Memoria per 32 giorni (1 x 15min); IP 67; Range 200 mt in spazio aperto.

Log 32 Registratore wireless aggiuntivo. Montato sul/i frigoriferi

TX-PI3A Presa interna per frigorifero

TX-fp10 Foro passa cavi 10mm

TX-fp20 Foro passa cavi 20mm

TX-clf Contatto libero con sonda temperatura

AL 2111 Allarme acustico mancanza corrente elettrica (max 12 ore) (solo ET 28 - ET 53)

